

SMART
Pulser

S.WRAP

操作手冊



恭喜您选购S. Wrap局部理疗绑带。

Smart Pulsar系统搭配 S.WRAP 是一款健康养生产品，旨在通过舒缓压力、促进放松、疏通气血、改善睡眠习惯、提升精神专注力，来维持并促进整体健康状况。

版权声明

版权所有 © 2026 Super Captain Co. Ltd.

保留所有权利。

未经Super Captain Co. Ltd.书面明确许可，本手册任何部分（包括所述产品及软件）不得复制、转让、转录、存储于检索系统或翻译成其他语言。购买者为备份目的而存储的文档不在此限。本条款不适用于依据 GNU 通用公共许可证（GPL）或其他免费开源许可协议授权的软件。

本手册内容细节可能与产品或配套软件存在差异，文档所有信息可随时更改，恕不另行通知。

目录

1. 预期用途	4
2. 产品清单	4
3. 安装	5
4. 使用方法	6
5. 清洁与保养.....	7
6. S-Wrap 技术参数.....	8
7. 质保条款	9


1. 预期用途

Smart Pulser系统不属于医疗器械，不用于诊断、治愈、缓解、预防或治疗任何疾病。

2. 产品清单



S. Wrap局部理疗绑带

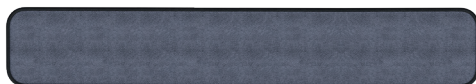


延长绑带

如发现任何部件损坏或缺失，请联系您所在地区的责任分销办公室。


3. 安装

- 从包装中取出所有配件。
- 确保使用环境尽可能无电磁干扰，使用时 1-2 米范围内请勿放置电视、微波炉、无线电话等设备。
- 将S. Wrap连接至Smart Pulsar主机，具体操作如下：将理疗绑带插头插入主机背面对应接口（1）中，系统会自动识别所接理疗绑带。


插入时请确保插头位置正确（即徽标朝上）。因操作不当造成的损坏不在保修范围内。

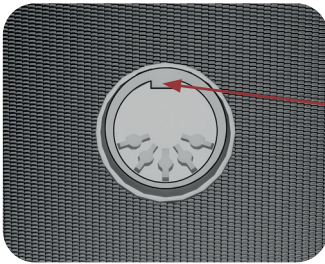

主机上的插槽

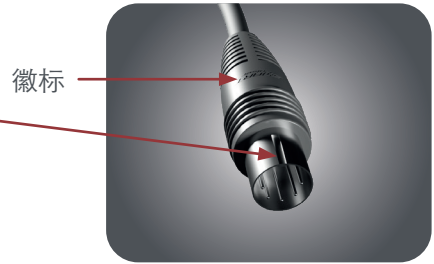

理疗绑带插头

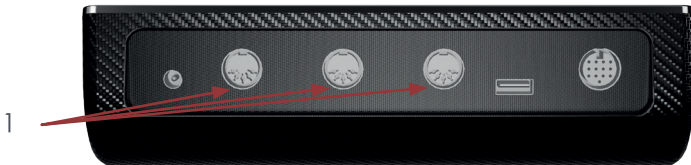

4. 使用方法

S. Wrap理疗绑带可用于局部应用，例如：膝部、足部、手部、肩部、背部等部位。

S. Wrap理疗绑带内置了一对纯铜线圈，可折叠、可缠绕使用。

请注意，请勿用毯子或塑料膜完全包裹S. Wrap 理疗绑带，需保证空气流通，防止受潮。

磁场不仅直

接作用于S.Wrap理疗绑带正上方，还会向四周扩散。S.Wrap理疗绑带最高磁场强度 ≤ 70 微特斯拉 (μT) 。

依据DIN0848标准前的规范，低频电磁场安全阈值为 $400\mu\text{T}$ ；水平方向约 1.5 米处，理疗仪磁场强度已大幅衰减。

本产品仅能通过原装S. Wrap理疗绑带进行操作。若未连接理疗绑带或理疗绑带故障，Smart Pulsar显示屏将出现错误提示。在此两种情况下，系统均无法启动使用。

如需要，可将随附的延长绑带连接至S. Wrap理疗绑带上。

5. 清洁与保养

理疗绑带应定期清洁以保持外观整洁，防止污垢和污染物积聚。根据使用频率和实际需求，可能需要更频繁的清洁。一旦发现污渍、灰尘或附着物，必须立即清除以防永久性污渍。建议使用温和的肥皂水溶液，或专用尼龙材质及人造皮革清洁剂进行表面去污。清洁时请使用湿润的白色布料。严禁使用瓷釉清洁剂、强腐蚀性化学清洁剂、含二甲苯、丙酮、丁酮（MEK）的液体，这类物质会立即造成材料损伤并加速老化。使用此类清洁剂需自行承担风险。

6. S.Wrap技术参数

序号	名称	参数、单位、类型与型号
1	线圈	1对绝缘导线，铜制
2	面料	100 %尼龙
3	尺寸	66 x 14 x 0,5 cm
4	线缆长度	1,77 m

强度	S.Wrap 理疗绑带表面平均磁场强度，单位： μT
敏感模式	0,65
10	3,14
25	9,23
50	18,46
100	36,92
150	46,15
200	55,38
400	120,00

7. 质保条款

Super Captain Co., Ltd. 的产品若存在材料、工艺或功能的制造缺陷，将按照法定质保条款承担责任，具体规定如下：

明显缺陷：

买方须在收货后1-3天内立即检查产品，并对明显缺陷进行通知。若未履行上述义务，逾期则丧失索赔保修的权利。

潜在缺陷：

隐蔽缺陷可在具有法律约束力的保修期内提出索赔。隐蔽缺陷一经发现必须立即上报。

质保免责范围：

担保的法律保护原则上适用。担保债权的除外情形：

- 正常磨损
- 不当操作
- 无视安全说明
- 暴力使用
- 自行拆解维修
- 使用非官方配件

保修服务：

制造商作为自愿保修的一部分，提供以下服务及服务时间：

- Smart Pulser理疗垫：三年

索赔需出示原始购买凭证。

保修服务不可转让，私人转售二手产品不享受保修。

制造商信息：

制造商：Super Captain Co., Ltd.

地址：香港九龙大有街 2-4 号旺景工业大厦 3 楼 D18 室

电话：+86 769 87908361

电子邮件：info@superduper.com.cn

版本：2026/04